

Diese Internetseite verwendet Cookies, um die Nutzererfahrung zu verbessern und den Benutzern bestimmte Dienste und Funktionen bereitzustellen. Durch die weitere Nutzung stimmen Sie dem zu. [OK](#) [Details](#)

Anschrift	PerkinElmer European Headquarters Ferdinand Porsche Ring 17 63110 Rodgau
Land	Deutschland
Telefon	0049 800 181 003
Internet	www.perkinelmer.com
Mitarbeiter	14000
Umsatz	\$3.8 billion USD
Gründungsjahr	1937

ANSPRECHPARTNER

Contact 1.	Frau Lucy Jenner Segment Marketing Manager, Industrial
Contact 2.	Abteilung Sales Phone: 0049 611 492 0 Fax: 0049 611 492 170
Contact 3.	Frau Gerline Wita Market Leader Materials Characterization

PRODUKTE ODER MASCHINEN

Spectrophotometers, Software, Accessories and Laboratory Support:

LAMBDA SPECTROPHOTOMETERS

Our LAMBDA 1050+ and 850+ UV/Vis/NIR spectrophotometers are two of our highest performance systems designed for analysis of coatings, high performance glass, and components in both research and manufacturing. The instruments meet industry standards for ultra-high performance, flexibility, and convenience.



INTEGRATING SPHERES

We offer three different sphere types: 60 mm, 100 mm, and 150 mm spheres. The most commonly used 150 mm sphere supports port fraction of recommended calculations such as International Commission on Illumination (CIE) and standard methods like EN410, ISO9050, JIS316 and more. The other sphere types are typically used for legacy accessories and special applications.



UNIVERSAL REFLECTANCE ANALYZER (URA)

For front-surface analysis, our URA is a must-have for labs measuring small, difficult samples - this tool uses an adjustable beam spot size. Samples lie flat on the measuring plate, and internal optics directs a beam to a measurement port. To maintain ideal path lengths and angles of incidence between background and sample measurement, our URA has its own kinematic detector module and pathlength compensator. The multiangle, highsensitivity URA automatically changes the incidence angle without having to adjust the sample or optics.




TOTAL AUTOMATED MEASUREMENT SYSTEM (TAMS)

The most flexible platform of its kind, the TAMS unit allows you to choose the right detector for angular-dependent measurements of optical properties of thin and thick samples, using a concentric rotation stage for sample and detector. Most glass analysis labs use the indium gallium arsenide (InGaAs) sphere detector within the TAMS, as it offers flexibility of measurement type and sample size and can handle most applications. Direct detectors are also available to use for specific applications. Both are sensitive, but the sphere is least prone to misalignment and other systematic errors, and it offers the highest accuracy for transmittance and reflectance.




AUTOMATED REFLECTANCE TRANSMITTANCE ANALYZER (ARTA)

Looking for the highest-level accuracy and sensitivity for your glass analysis samples? Look no further. The ARTA uses our TAMS technology and enhances it to reach the level of precision you need. The ARTA includes a 60 mm integrating sphere detector, a built-in polarized driver capable of measuring BRDF/BTDF with a variable slit and sample holder, and a GlanTompson polarizer. The ARTA provides more energy due to its fixed polarizer assembly and high signal-to-noise ratio. Mostly used in niche applications, the ARTA provides more options for scattering measurement and allows for smaller beam use.

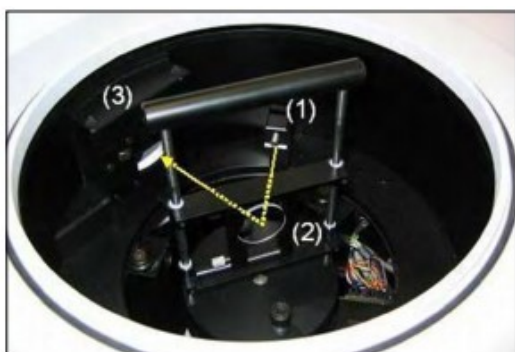


LARGE SAMPLE REFLECTANCE/TRANSMITTANCE (LSRT)

Analyzing larger samples? Our LSRT accessory accurately tests large samples such as car windows, windscreens, and toughened glass panes. Its advanced capabilities enable you to analyze any type of laminated and bended glass. Measurements are taken with a 60 mm sphere detector, and our user-friendly software allows you to seamlessly switch between transmission and reflection modes as needed.

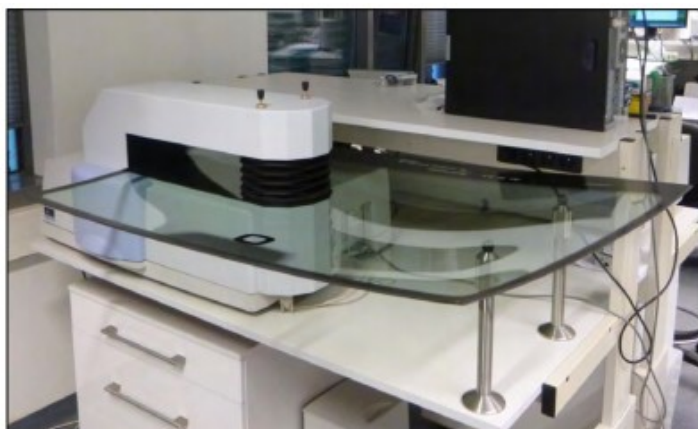


UPWARD-LOOKING (UL 150)

If you're tasked with analyzing horizontal samples, our upward-looking (UL) 150 accessory is perfect for measuring scattering light and haze in airplane glass and glazing according to EN410, ISO9050, ASTM E903, or ASTM1003-95. Our UL 150 accessory was crafted with an open port design – samples don't have to be clamped, as gravity holds them in place on top of the sphere. This innovative design requires measurements to be done in a dark room. You may also use a cover for added protection.

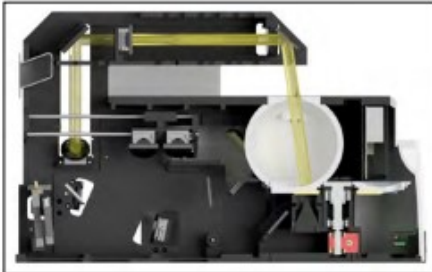


UL150 Reflectance

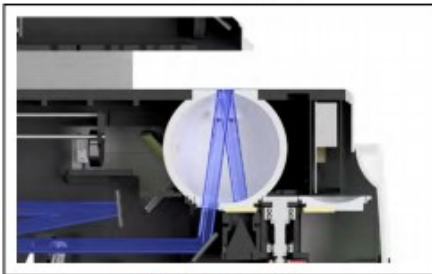

UL150 Transmittance

UPWARD-LOOKING (UK 270)

Together with our LAMBDA 1050+ system, the upward-looking (UL) 270 mm integrating sphere is a unique accessory that provides superior accuracy and results. It's perfect for measuring diffused transmittance in materials such as glazing, frits, pyramid, and textured glass. The National Fenestration Rating Council (NFRC) 300-2017 testing method requires a sphere larger than 250 mm to accommodate the ideal ratio of less than 0.04 mm between the aperture area and sphere area. Our exclusive UL 270 meets and exceeds those requirements.

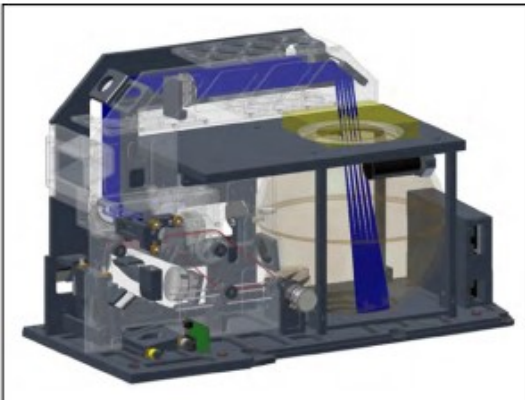

FOURIER TRANSFORM INFRARED (FT-IR) TECHNOLOGY

When analyzing the surface of glass, you're often testing its emissivity, or effectiveness in emitting energy as thermal radiation. This is a key property in determining the glass' energy-saving ability according to EN673. Our Spectrum 3 FTIR system, coupled with our IR reflectance accessories, provides an easy, novel technique for emissivity testing. How's that for saving energy?



LASER ABLATION INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY (LA-ICP-MS)

In glass, if the elemental distribution of silicate or silicon is incorrect, problems in manufacturing will most likely occur. That's why it's so important to identify and understand its raw materials. Our NexION LA-ICP-MS system performs fast and accurate elemental analysis of glass samples. It enables you to collect and compare information for research and development, forensic applications, and more.



GESCHICHTE & PRODUKTE

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Sie Gesundheitsprobleme früher erkennen und effektiver behandeln könnten.

Mit rund 14.000 Mitarbeitern weltweit leisten wir Pionierarbeit bei wissenschaftlichen Technologien für bessere

In vielen Branchen und in mehr Ländern setzen wir uns dafür ein, innovative Lösungen anzubieten und fortschritt

Company Profile of **PerkinElmer**

A service of glasssglobal.com, an affiliate of glasssglobal group.

Die auf dieser Seite ausgedruckten Firmeninformationen unterliegen dem Urheberrecht und sind Eigentum der entsprechenden Firma. Alle Rechte sind ausdrücklich vorbehalten. Jeder Nutzer, der sich Zugang zu diesem Material zugänglich macht, tut dies zu seinem persönlichen Gebrauch und die Nutzung dieses Materials unterliegt seinem alleinigen Risiko. Die Weiterverteilung und jegliche andere gewerbliche Verwertung des vorliegenden Adressenmaterials ist ausdrücklich untersagt. In den Fällen, in denen solches Adressenmaterial durch eine dritte Partei beigelegt wurde, erklärt jeder Besucher sein Einverständnis, die speziellen zutreffenden Nutzungsbedingungen anzuerkennen und sie zu respektieren. Glass Global garantiert oder bürgt nicht für die Genauigkeit oder die Zuverlässigkeit von irgendwelchen Informationen, die in den veröffentlichten Adressinformationen enthalten sind, oder auch in Webseiten auf die hier Bezug genommen wird. www.glasssglobal.com - Die Internationale Portalseite für die Glasindustrie - OGIS GmbH